

委託先：ALSOKあんしんケアサポート株式会社

安心、安全を提供する

緊急通報サービスのご案内

こんな時、通報装置のボタンを押してください！

★急病・けがなど緊急時に！

看護師が様子をお聞きして救急車の出動要請をします！

★健康・医療のご相談に！

24時間、看護師・相談員があなたのお声をお待ちしています！

★状況ご確認のために！

月に1回あんしんセンターから利用者様宅へお電話します！

ボタンを押すのって
勇気があるなあ

不安

押したら
何がおこる？

どんな人が
でるんだろう？

お変わりないですね。
お声が聞ければ
安心です。

これなら安心だ！

うっかり押しして
しまった場合
でも、24時間相
談員が親切丁寧に
対応します

サービスのしくみ

ご利用者様

急病

在宅
確認

出動

連絡・相談

確認



消防署

必要に応じて出動要請



あんしんセンター*



協力員

必要に応じて確認依頼

あんしんケアサポート様が提供する「緊急通報サービス」受信センターの通称です。

緊急事態

救急車などの出動要請。その際、消防署にご利用者さまの既往歴・症状などを連絡します。

健康・介護に関するご相談

看護師が24時間365日通報をお受けしてアドバイスを行います。

ご連絡・駆けつけ

協力員の方や親族の方にご連絡・駆けつけ依頼をすることもできます。

24時間365日


いつでもお気軽に押してください。

機器には「固定型」と「携帯型」の2種類ございます

固定型

※固定型を希望される場合は固定電話回線が必要です ※NTTアナログ回線を推奨


本体写真

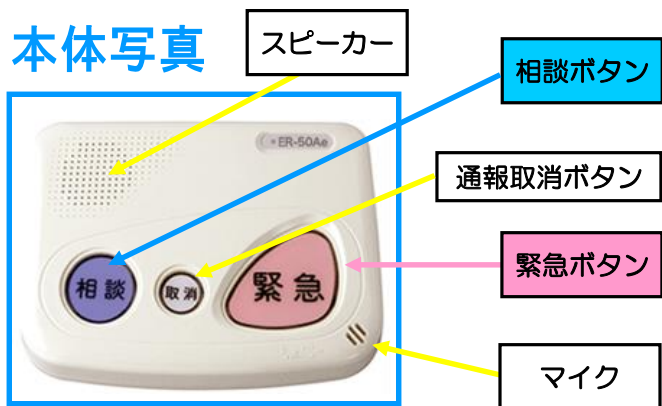

固定型の特徴

<p>肩や肘でも押しやすい大きなボタン</p>	<p>停電時最大5時間稼働</p>
<p>ペンダントで家のどこからでも通報できる※1</p>	<p>自動でセンターへ電池切れ通報を通知</p>

ペンダント型送信機写真

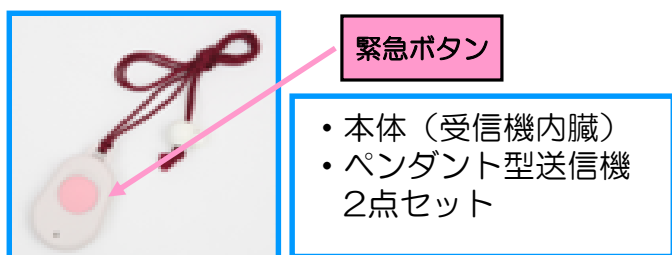

携帯型

※充電作業のできる方のみ設置可 ※ご自宅内のみでの使用に限ります

本体写真



- 本体
- 専用ストラップ
- 充電器 合計3点

充電時間：約2時間
重さ：約101g

充電器写真



充電の方法



※ペンダントひとつで
通報と会話ができます

<p>自宅の何処からでも通報・通話が可能</p>	<p>電話回線の工事が不要 設置場所をとりません</p>
<p>簡単操作</p>	<p>携帯電話の電波の為 電話回線が不要</p>

(※ 本体サイズは幅51×高さ90×厚さ18.5mm)